


Accesorios estandar:



Almohadilla de gel







Funciones y características:

Proporciona un posicionamiento estable y cómodo, hecho de gel de polímero viscoelástico. Aumento de la presión, lo que evita las escaras. Reducción del tiempo de operación. Fácil limpieza, rayos X. Temperatura de trabajo de -10 a 50. Buena biocompatibilidad con los tejidos humanos. Rentable y duradero.

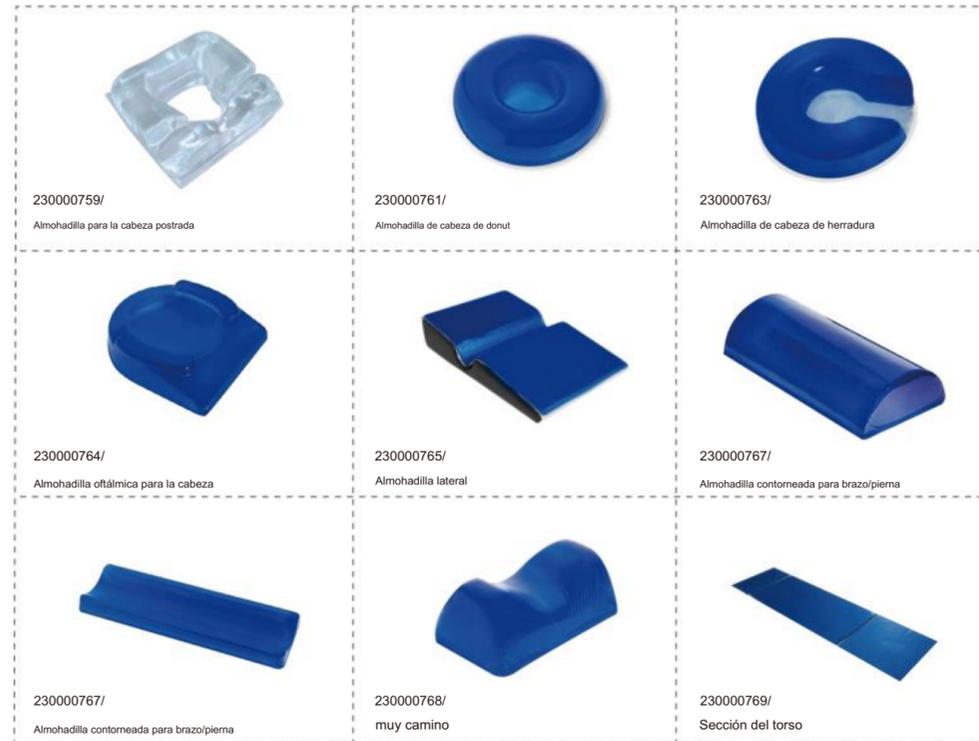

La amplia gama de ajustes de posición es adecuada para más requisitos del departamento de cirugía

OP750 es una mesa de operaciones Mecánica que cumple con varias solicitudes de diferentes departamentos de cirugía. Proporciona varias posiciones a través de una operación simple y precisa al tiempo que garantiza la seguridad y la comodidad de los pacientes. OP750 rentable con versatilidad es la opción ideal para la sala de operaciones moderna.

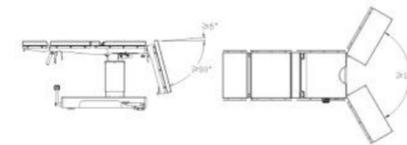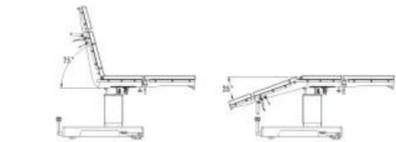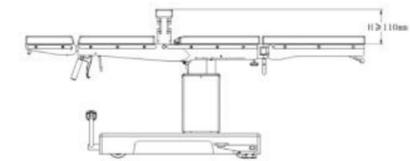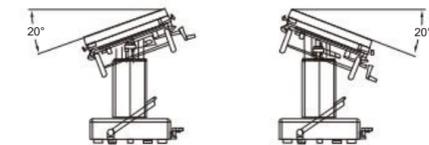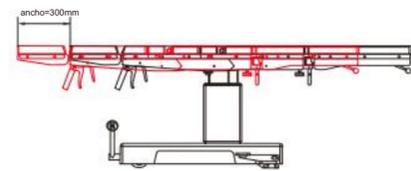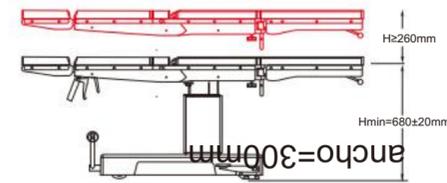

Especificaciones técnicas

Longitud de la mesa	2020 mm
Ancho de la mesa (sin rieles laterales)	520 mm
Altura de la mesa (sin colchón)	680 mm a 940 mm
Trendelenburg/Reversa	20°/20°
Inclinación lateral (izquierda/derecha)	20°/20°
Placa trasera arriba/abajo	75°/25°
HeadPlate arriba/abajo (desmontable)	30°/45°
Placa de pierna arriba/abajo (desmontable)	5°/90°
Pierna placa dividida (desmontable)	180°
Riñón-puenteAscensor UP	110 mm
Desplazamiento longitudinal	300 mm
Capacidad de peso	297Kg



Aegistab OP750

Mecánico  
Mesa de operaciones



**AEOMED**

Reliable Quality Thoughtful Service

La información contenida en este prospecto es correcta en la fecha de publicación. La política de Beijing Aeonmed Co., Ltd. es una de mejora continua de sus productos. En virtud de esta política, Aeonmed se reserva el derecho de realizar cualquier cambio que pueda afectar la información contenida en este folleto sin previo aviso.

Sede: 1182, Parque Científico Fengtai, Pekín, China (100070)  
Parque Científico: No. 10, Calle Chaobai, Zona de Desarrollo Yanjiao, Ciudad Sanhe, Provincia Hebei, China (065201)  
TEL: +86-10-5841 1198 FAX: +86-10-6371 8989

Http://www.aeonmed.com Como electrónico: marketing@aeonmed.com

ADP750-1708

**AEOMED**  
Reliable Quality Thoughtful Service

Accesorios opcionales:  
Características:

Todos los accesorios de la mesa están hechos de acero inoxidable SUS304, todas las superficies son fáciles de limpiar y desinfectar, los accesorios estándar de 6 tipos y 13 opcionales admiten una multitud de procedimientos de posiciones corporales y cumplen con la mayoría de los requisitos de las cirugías.

121000347/121000348 Placa de pie (abrazadera con muescas)	121000349/ Soporte de brazo de posición alta	121000351/ Soporte de conexión
* 121000350/121000351 Reposacabezas (soporte de conexión)	Número de artículo: 121000352/121000351 Placa de cabeza (soporte de conexión)	121000353/ Mesa de operaciones manual
121000354/ Bandeja de instrumentos	121000355/ Soporte ilíaco	121000356/ Almohadilla intervertebral
121000357/ Tazón de drenaje	* 121000358/ Tracción ortopédica	121000360/ Marco de infusión

Características de la ortopedia.

La tracción ortopédica está diseñada según los requisitos de la UE, puede cumplir con la mayoría de las cirugías ortopédicas. Toda la parte está hecha de acero inoxidable SUS304 con alta resistencia, estable durante las cirugías. Esta estructura es adecuada para rayos X y brazo en C.

La estructura principal de la mesa de operaciones está hecha de acero de alta calidad. La base, la carcasa de la columna, los rieles de accesorios y los accesorios metálicos están hechos de acero inoxidable. Estructura estable, buena forma, fácil de limpiar.

1

- Las pantallas funcionales a continuación están controladas por un cilindro de importación: placa principal arriba y abajo, mesa trendelenburg y trendelenburg inversa, placa trasera arriba y abajo.
- Fácil de operar, posicionamiento preciso y estable.
- La operación se enfoca en la cabeza sin afectar la cirugía.



8

- El colchón fabricado con espuma de PU de alta densidad es resistente al agua.
- Alta elasticidad y confort.
- Diseño removible, buena forma, fácil de limpiar, excelente perspectiva de rayos X.



7

- La capa de plomo de película de rayos X incorporada cumple con la solicitud de disparo para diferentes partes del cuerpo durante cirugía.



6

- Mesa de operaciones arriba y abajo controlada por bomba de pie, una estructura de integración de bomba de aceite, tanque de combustible y manivela.
- La bomba integrada proporciona una alta estabilidad de la mesa durante la operación de subida y bajada y una excelente capacidad de carga.
- Fácil de operar, diseño que ahorra tiempo.



2

- El puente de riñón incorporado se puede elevar hasta 110 mm.
- Proporciona visualizaciones solicitadas por cirugía de riñón y vesícula biliar.



3

- El desplazamiento longitudinal de la mesa opcional (hasta 300 mm) proporciona suficiente espacio. Espacio para trabajo de rayos X.



4

- La mesa de operaciones es fácil de arreglar y cambiar de manera simple y eficiente. sistema de bloqueo de base.



5

- El espacio reservado para los pies en la base se combina con el trabajo cercano en la mesa de operaciones al tiempo que garantiza la estabilidad.