



Cirugía de artroscopia de rodilla

Accesorios recomendados:

- 230000760 almohadilla de gel para cabeza de donut x 1
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 121000294 reposabrazos x 2
- 121000532 Rodillera



Cirugía Rectal

Accesorios recomendados

- 121000294 reposabrazos x 2
- 121000347 Placa de pie 1 par
- 121000348 Abrazadera con muescas x 2
- 121000355 Soporte ilíaco x1



Procedimientos ortopédicos

Accesorios recomendados:

- 230000760 almohadilla de gel para cabeza de donut x 1
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 121000358 Tracción ortopédica x1
- 121000349 Soporte de brazo de posición alta x 1
- 121000294 reposabrazos x 1



Cirugía torácica de riñón/vesícula biliar

Accesorios recomendados

- 230000760 almohadilla de gel para cabeza de donut x 1
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 121000294 reposabrazos x 1
- 121000349 Soporte de brazo de posición alta x 1
- 230000766 Almohadilla en forma de domo universal x1



Retrasos OP830/330

Electrónico
Mesa de operaciones



AEO MED
Reliable Quality Thoughtful Service

Sede: 11B2, Parque Científico Fengtai, Pekín, China (100070)
Parque Científico: No. 10, Calle Chaobai, Zona de Desarrollo Yanjiao, Ciudad Sanhe, Provincia Hebei, China (065201)
TEL: +86-10-5841 1198 FAX: +86-10-6371 8989
Http: //www.aeonmed.com Correo electrónico: marketing@aeonmed.com

La información contenida en este prospecto es correcta en la fecha de publicación. La política de Beijing Aeonmed Co., Ltd. es una de mejora continua de sus productos. En virtud de esta política, Aeonmed se reserva el derecho de realizar cualquier cambio que pueda afectar la información contenida en este folleto sin previo aviso.

AOP830/330-1708

AEO MED
Reliable Quality Thoughtful Service

Una mesa de operaciones rentable y de rendimiento múltiple que admite una carga de hasta 297 kg, adaptable para cumplir con los diferentes requisitos de cirugía.



- **Material de primera calidad.**
 - El marco de la mesa está especialmente revestido
 - Otro acero expuesto es acero inoxidable SUS304
 - Fácil de limpiar y desinfectar
 - Opcional con marco de mesa de acero inoxidable SUS304



- **Configuración quirúrgica**
 - Función flex y reflejo
 - Los ángulos de la mesa y las longitudes de las secciones se pueden ajustar dentro de un amplio rango. 6 accesorios estándar y 13 opcionales
 - Combinación inteligente de todos estos encuentros diversas necesidades quirúrgicas.



- **Batería incorporada de alta eficiencia**
 - Importado de Panasonic
 - Máximo 15 días de tiempo de trabajo
 - Sin solicitud de alimentación de CA para aumentar la seguridad de la cirugía




- **Acceso perfecto a rayos X**
 - Extraordinaria capacidad de desplazamiento longitudinal de 300 mm que crea una radiografía perfecta acceso



- **Ajuste ergonómico**
 - Diseño conveniente para la llave de la placa de la pierna y la placa de la cabeza, mueva la pata y la placa de la cabeza con una mano
 - Los resortes de gas importados garantizan un movimiento suave
 - Abrazaderas de orificio redondo importadas, accesorios fáciles de bloquear y desbloquear, tiempo seguro durante la operación
 - La altura de la mesa ajustable (680-950 mm) proporciona unas condiciones de trabajo cómodas




- ⑥ **Seguridad**
 - El panel de control se apaga automáticamente cuando no funciona durante más de 1 minuto, evita cualquier operación incorrecta

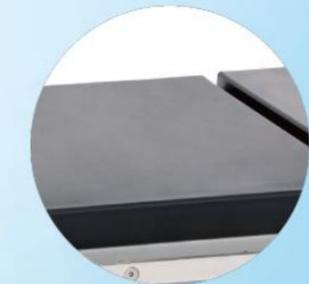


- **Almohadilla**
 - Colchón de espuma PU, fácil de desinfectar y esterilizar
 - Reducir efectivamente la posibilidad de úlceras por decúbito del paciente



- **Ascensor incorporado Riñón-puente**
 - Sin efecto negativo en la radiotransparencia de rayos X, apoya la cirugía de riñón y vesícula biliar de manera eficiente

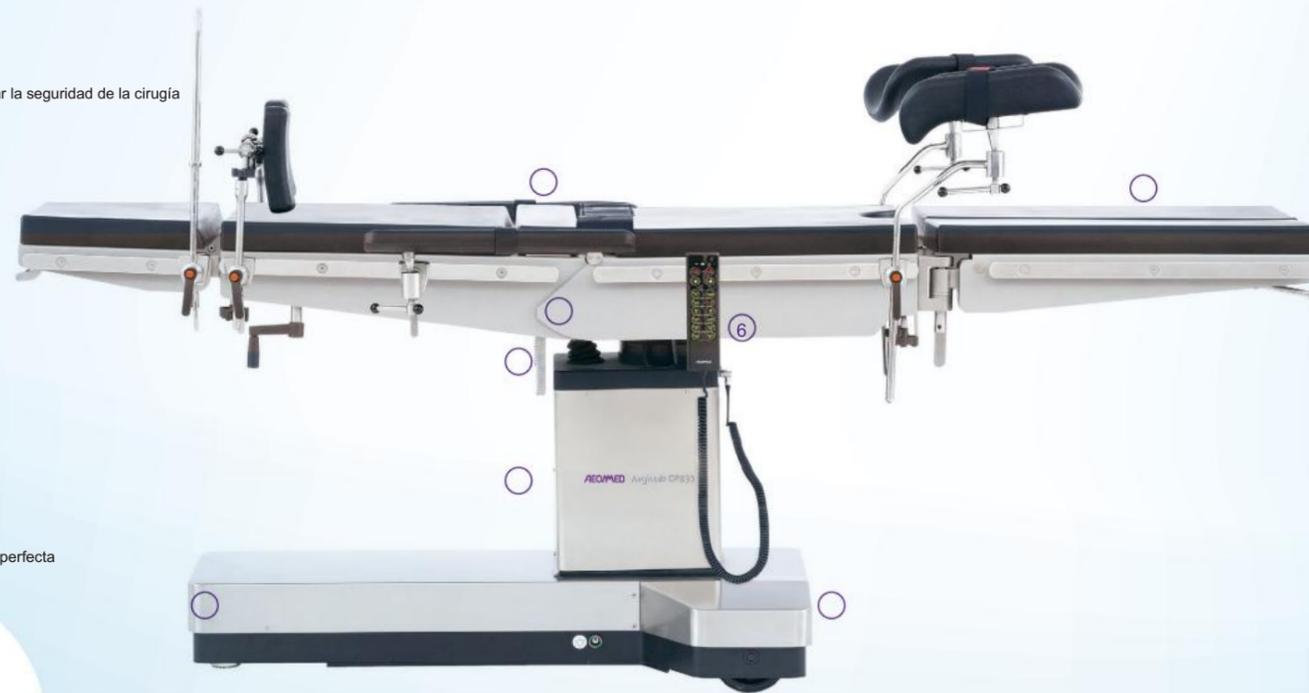


Amplio rango de ajuste para todas las posiciones, satisfacer la demanda de diferentes cirujías

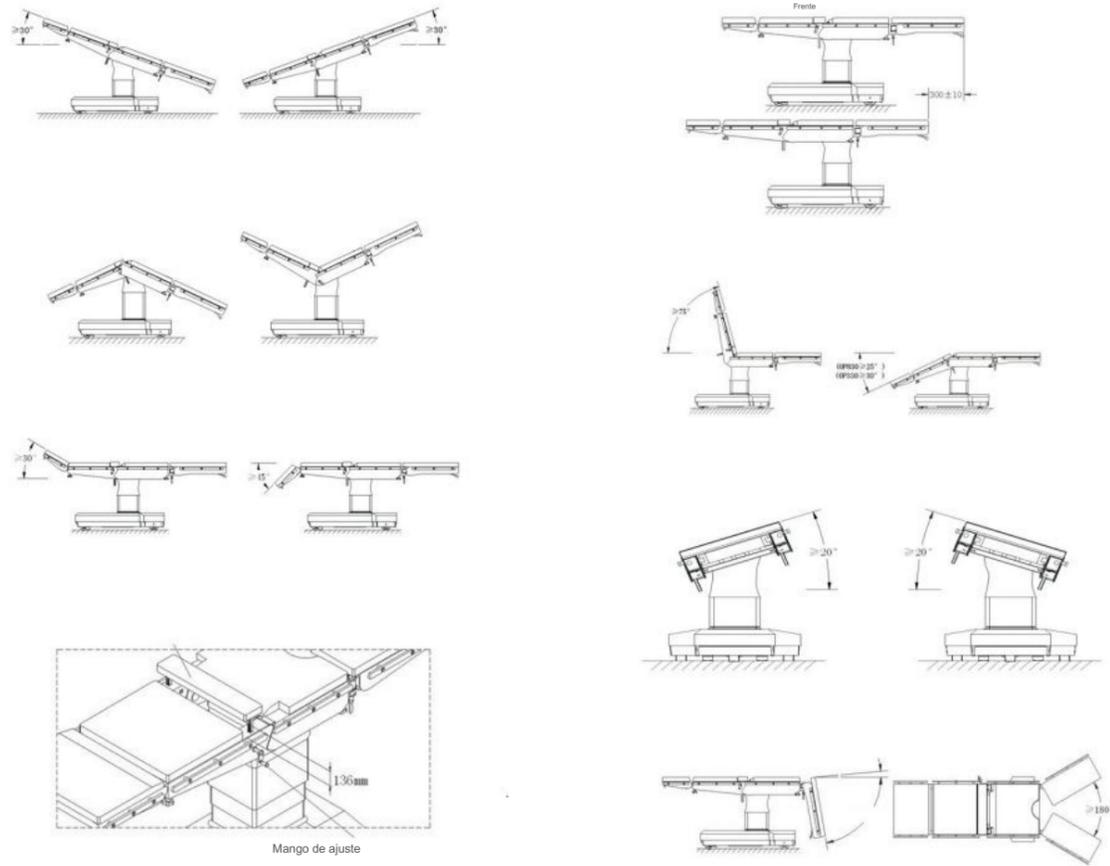

Accesorios opcionales:


Características:

Todos los accesorios de la mesa están hechos de acero inoxidable SUS304, todas las superficies son fáciles de limpiar y desinfectar, 6 tipos de accesorios estándar y 13 opcionales pueden soportar una multitud de posiciones y procedimientos corporales, satisfacen completamente la mayoría de las demandas de cirujías.

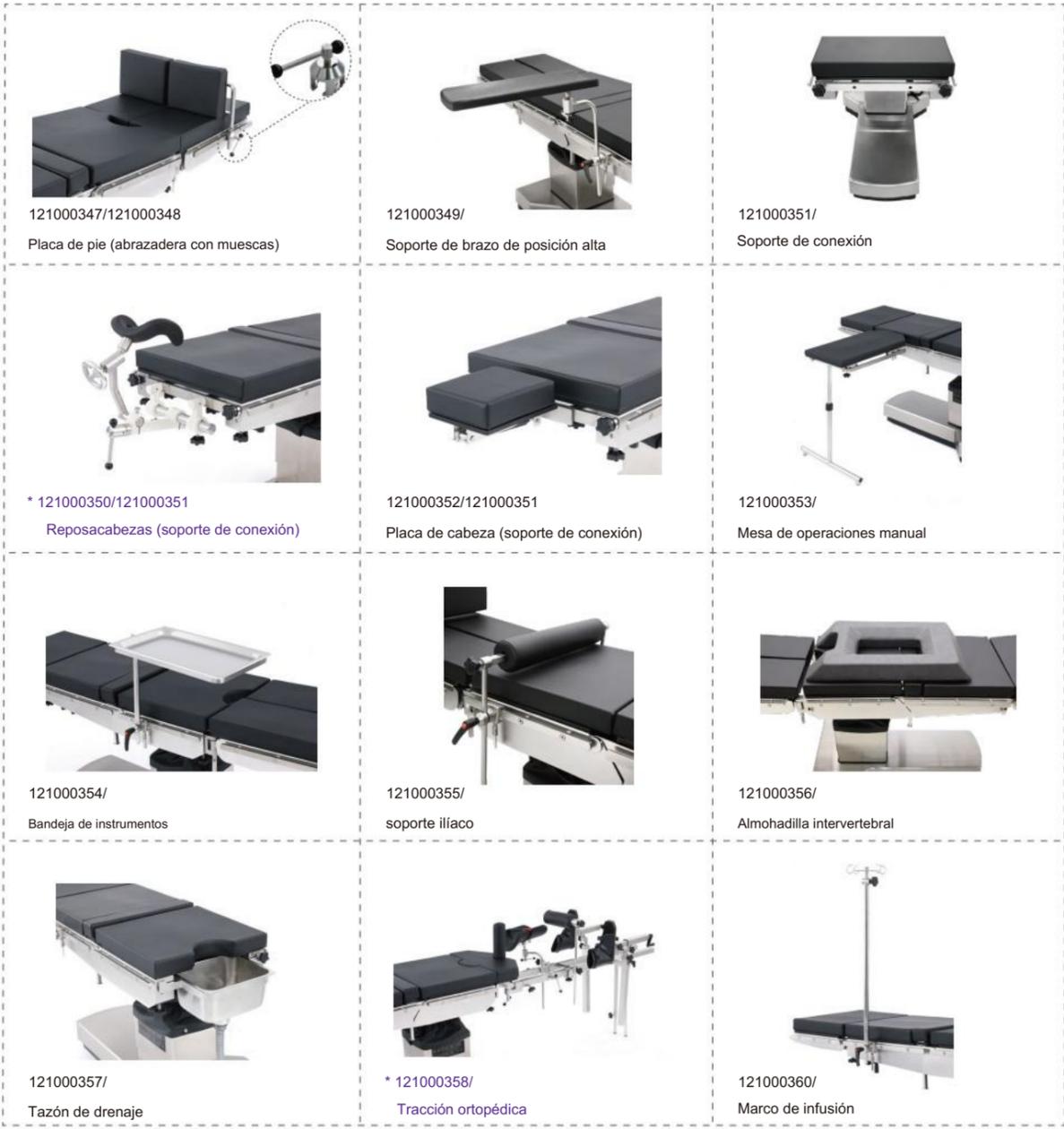

Características de ortopedia

La tracción ortopédica está diseñada según los requisitos de la UE, cumple con la mayoría de los requisitos de cirujías ortopédicas. Todas las piezas están hechas de acero inoxidable SUS304 de alta resistencia, estable durante las cirujías. Esta estructura es adecuada para rayos X y brazo en C.

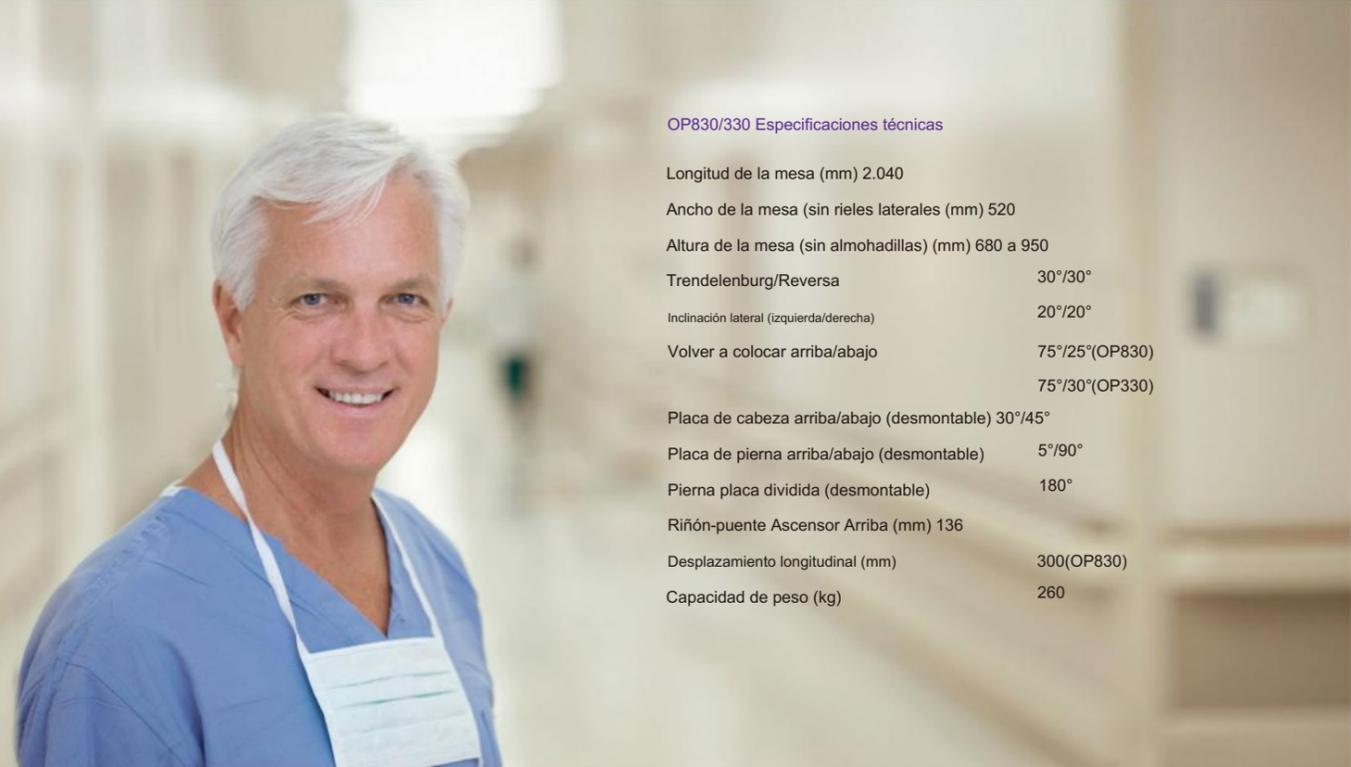

OP830/330 Especificaciones técnicas

Longitud de la mesa (mm)	2.040
Ancho de la mesa (sin rieles laterales (mm)	520
Altura de la mesa (sin almohadillas) (mm)	680 a 950
Trendelenburg/Reversa	30°/30°
Inclinación lateral (izquierda/derecha)	20°/20°
Volver a colocar arriba/abajo	75°/25°(OP830) 75°/30°(OP330)
Placa de cabeza arriba/abajo (desmontable)	30°/45°
Placa de pierna arriba/abajo (desmontable)	5°/90°
Pierna placa dividida (desmontable)	180°
Riñón-puente Ascensor Arriba (mm)	136
Desplazamiento longitudinal (mm)	300(OP830)
Capacidad de peso (kg)	260


Accesorios estandar:



Almohadilla de gel

Funciones y características:

Proporciona un posicionamiento estable y cómodo, hecho de gel de polímero viscoelástico
 Dispersión de presión, evitando escaras Reducción del tiempo de operación Fácil limpieza, rayos X Temperatura de trabajo de -10 a 50 Buena biocompatibilidad con tejidos humanos Rentable y duradero

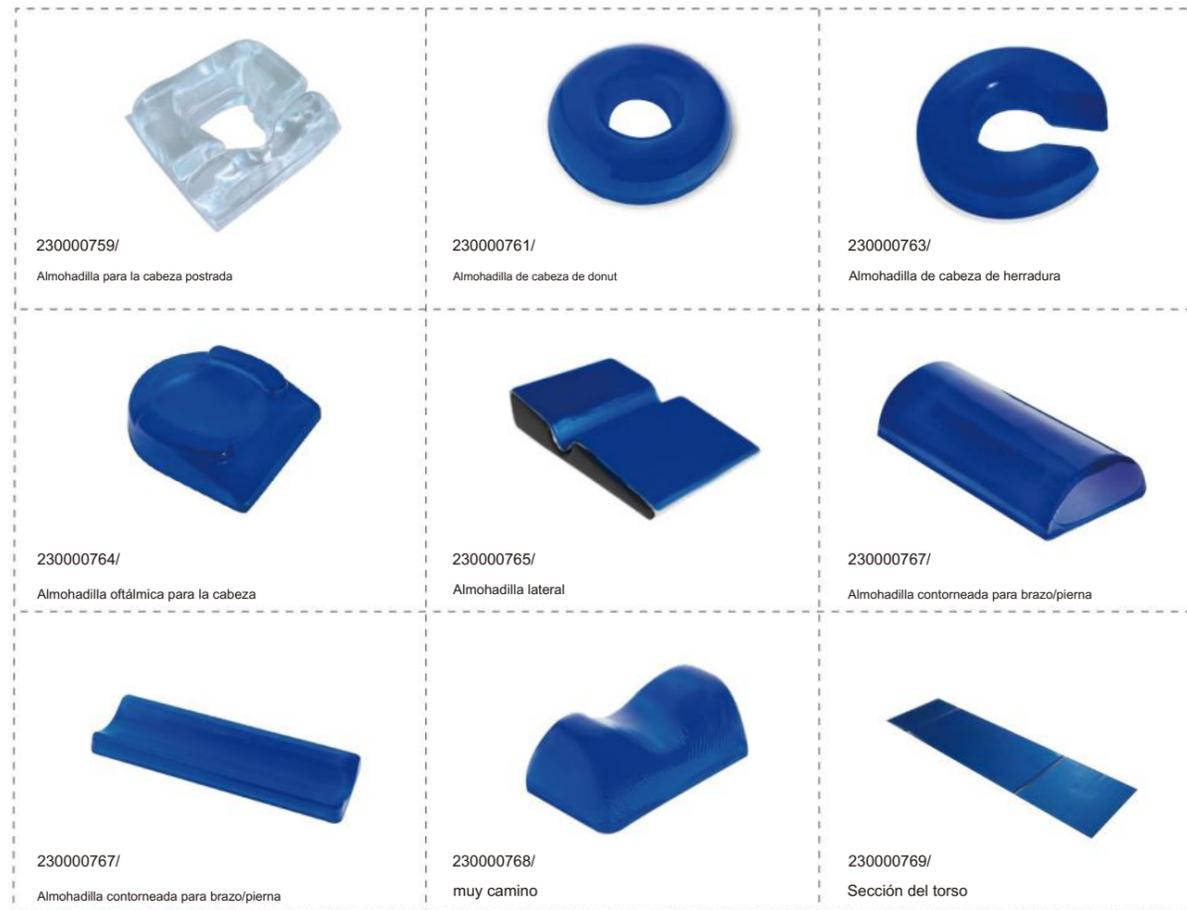

Dosis de cirugía:



Cirugía torácica/abdominal

Accesorios recomendados:

- 230000760 almohadilla de gel para cabeza de donut x 1
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 121000347 Placa de pie 1 par
- 121000348 Abrazadera con muescas x 2
- 121000294 reposabrazos x 2



Cirugía ORL

Accesorios recomendados:

- 230000760 almohadilla de gel para cabeza de donut x 1



Urología/OB/Ginecología

Procedimientos Cirugía

Accesorios recomendados:

- 230000760 almohadilla de gel para cabeza de donut x 1
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 121000295 Muleta de rodilla x 2
- 121000357 Tazón de drenaje x 1
- 121000294 reposabrazos x 2



Cirugía de la columna

Accesorios recomendados:

- 230000759 Almohadilla de gel para la cabeza postrada x 1
- 121000356 Almohadilla intervertebral x1
- 121000294 reposabrazos x 2
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 230000766 Almohadilla en forma de domo universal x1



Operación de hombro

Accesorios recomendados:

- 121000294 reposabrazos x 2
- 121000350 reposacabezas x 1
- 121000351 Soporte de conexión x 1



Neurocirugía

Accesorios recomendados:

- 121000294 reposabrazos x 2
- 121000350 reposacabezas x 1
- 121000351 Soporte de conexión x 1
- 230000769 Almohadilla de gel para la sección del torso x 1
- 230000766 Almohadilla en forma de domo universal x1