

Interfaz práctica y conveniente

El MEDITOM DT-200S/150S es un electroquirúrgico multiusos.
Generador para uso en quirófanos y centros quirúrgicos modernos.

Varios modos de funcionamiento

Cuenta con funciones monopolares y bipolares para satisfacer todas sus necesidades.
demandas quirúrgicas. • 2

modos de corte/COAG monopolar

- 1 modo de corte/coagulación bipolar

Función de seguridad del sistema DRM

El sistema DRM (monitoreo de electrodos de retorno del paciente Daiwha) está diseñado para desactivar el generador para evitar lesiones o quemaduras durante el funcionamiento. Sonará una alarma y la salida se cortará automáticamente en caso de una pérdida de contacto. (SOLO APLICABLE CON ALMOHADILLA DOBLE)


Máxima compatibilidad con diversos accesorios

Capaz de utilizar con accesorios de varias marcas.

Se pueden configurar diferentes ranuras de memoria de usuario para mayor comodidad.

Áreas de uso

Cirugía general
Dermatología
Endoscopia
Cirugía vascular
Ginecología
Cirugía cardíaca y torácica
Otorrinolaringología
Cirugía Pediátrica
Cirugía mínimamente invasiva (CMI)
Neurocirugía
Cirugía plástica
Ortopedia
Urología
Cirugía
Resección transuretral (RTU)

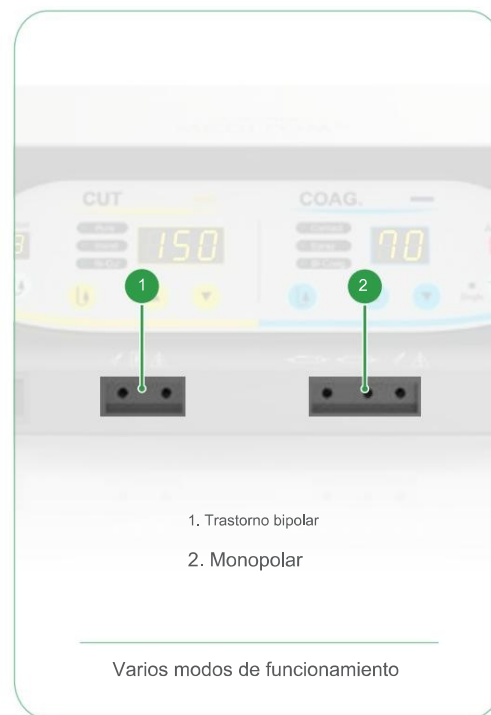

Nombre del producto	Unidad electroquirúrgica
Nombre del modelo	MEDITOM DT-200S/150S
Frecuencia principal	380 KHz +10%, 475 KHz +10% _
Tasa de repetición	33 kHz
HFLC	Menos de 150 mA
LFLC	•Conexión del paciente a tierra: Menos de 0,01 mA •Chasis a tierra: Menos de 0,1 mA
Fuente de poder	120/230 V (+10%), 50/60 Hz
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	137 x 300 x 395 milímetros
Peso	13 kilos
Consumo de energía	800 VA

DT-200S

<Tolerancia: ± 20%>

MODO		PRODUCCION POTENCIA MÁXIMA	Señor calificado (ohmios)
MONOPOLAR CORTAR	PURO	200 W	500 Ω
	MEZCLA	150 W	300 Ω
MONOPOLAR COAG	CONTACTO	80 W	300 Ω
	PULVERIZACION	70 W	500 Ω
BIPOLAR	CORTAR	80 W	200 Ω
	COAG	70 W	100 Ω

DT-150S

<Tolerancia: ± 20%>

MODO		PRODUCCION POTENCIA MÁXIMA	Señor calificado (ohmios)
MONOPOLAR CORTAR	PURO	150 W	500 Ω
	MEZCLA	120 W	300 Ω
MONOPOLAR COAG	CONTACTO	70 W	300 Ω
	PULVERIZACION	60 W	500 Ω
BIPOLAR	CORTAR	70 W	200 Ω
	COAG	60 W	100 Ω