

Interfaz práctica y conveniente

El MEDITOM DT-400S/300S es un equipo electroquirúrgico multiusos. Generador para uso en quirófanos y centros quirúrgicos modernos.

Varios modos de funcionamiento

Cuenta con funciones monopolares y bipolares para satisfacer todas sus necesidades. demandas quirúrgicas. • 4 modos de corte monopolar
• 3 modos de COAG monopolar
• 1, 2 Modo de CUT/COAG bipolar

Función de seguridad del sistema DRM


El sistema DRM (monitoreo de electrodos de retorno del paciente Daiwha) está diseñado para desactivar el generador para evitar lesiones o quemaduras durante el funcionamiento. Sonará una alarma y la salida se cortará automáticamente en caso de de una pérdida de contacto. (SOLO APLICABLE CON ALMOHADILLA DOBLE)

Máxima compatibilidad con diversos accesorios

Capaz de utilizar con accesorios de varias marcas. Se pueden configurar diferentes ranuras de memoria de usuario para mayor comodidad.

Áreas de uso

Cirugía general
Dermatología
Endoscopia
Cirugía vascular
Ginecología
Cirugía cardíaca y torácica
Otorrinolaringología
Cirugía Pediátrica
Cirugía mínimamente invasiva (CMI)
Neurocirugía
Cirugía plástica
Ortopedia
Urología
Cirugía
Resección transuretral (RTU)

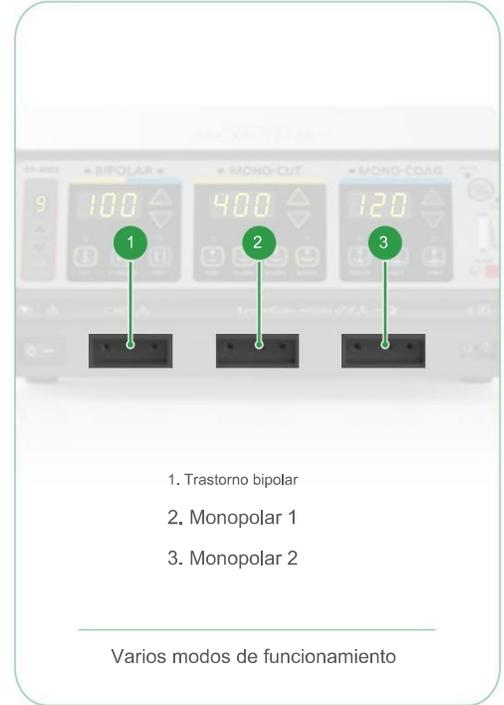

Nombre del producto	Unidad electroquirúrgica
Nombre del modelo	MEDITOM DT-400S/300S
Frecuencia principal	380 KHz +10%, 475 KHz +10% _
Tasa de repetición	33 kHz
HFLC	Menos de 150 mA
LFLC	•Conexión del paciente a tierra: Menos de 0,01 mA •Chasis a tierra: Menos de 0,1 mA
Fuente de poder	120/230 V (+10%), 50/60 Hz
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	147 x 330 x 417 milímetros
Peso	16 kilogramos
Consumo de energía	900 VA

DT-400S

<Tolerancia: ± 20%>

MODO		PRODUCCIÓN POTENCIA MÁXIMA	Señor calificado (ohmios)
MONOPOLAR CORTAR	PURO	400 W	500 Ω
	Mezcla 1	320 W	300 Ω
	Mezcla 2	240 W	300 Ω
	Mezcla 3	160 W	300 Ω
MONOPOLAR COAG	FORZADO	120 W	300 Ω
	SUAVE	120 W	300 Ω
	PULVERIZACIÓN	100 W	500 Ω
BIPOLAR	ESTÁNDAR	100 W	100 Ω
	SUAVE	80 W	100 Ω
	CORTAR	100 W	200 Ω

DT-300S

<Tolerancia: ± 20%>

MODO		PRODUCCIÓN POTENCIA MÁXIMA	Señor calificado (ohmios)
MONOPOLAR CORTAR	PURO	300 W	500 Ω
	Mezcla 1	300 W	300 Ω
	Mezcla 2	220 W	300 Ω
	Mezcla 3	140 W	300 Ω
MONOPOLAR COAG	FORZADO	100 W	300 Ω
	SUAVE	100 W	300 Ω
	PULVERIZACIÓN	100 W	500 Ω
BIPOLAR	ESTÁNDAR	100 W	100 Ω
	SUAVE	80 W	100 Ω
	CORTAR	100 W	200 Ω