



Producto profesional de equipos médicos

Lámpara quirúrgica LED / Lámpara de exploración médica LED



Parque industrial médico de optoelectrónica Mplent, NO.15, Liujiao
Pavilion Road, Langli Street, ciudad de Changsha, provincia de Hunan, China
Teléfono: +86-0731-85229777
Móvil: +86-18175116933
Correo electrónico:
jena@mplent.net WhatsApp/WeChat: +86-181 75116933
<https://en.mplent.com>

Hunan Mplent Optoelectronics Technology CO., Ltd. / Soporte Vital S.A

COMPañÍA INTRODUCCIÓN

Fundada en 2009, Mplent es uno de los principales fabricantes de lámparas quirúrgicas LED, visores de radiografías LED, lámparas de exploración LED y cajas de visualización LED para pruebas médicas en China. Comprometidos firmemente con nuestra misión de «innovación, creación inteligente, iluminación para una vida saludable», nos dedicamos a la innovación en el sector de la iluminación LED médica y la salud humana.

Situada en la provincia de Hunan, China, Mplent posee una fábrica de vanguardia con 5000 empleados. Taller de equipos médicos de 1 metro cuadrado. Como fabricante de productos médicos para el sector sanitario, Mplent presta la máxima atención a la calidad de sus productos y operaciones. Todos los productos cumplen con las normas ISO 13485 y la certificación CE.


Mplent cuenta con una sólida red de I+D, marketing y servicio tanto en China como en el extranjero. Nuestro desarrollo de productos se centra en la creación de productos y soluciones innovadores para el quirófano. La empresa posee varias patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y patentes de diseño. Ofrecemos servicios de fabricación OEM y ODM para nuestros valiosos clientes. Al tiempo que mejoramos la calidad de la atención médica, contribuimos a reducir sus costos, haciéndola más accesible a un mayor número de personas.

Con la misión de servir a la industria global de la iluminación médica, Mplent se esfuerza constantemente por ofrecer productos y servicios más innovadores en los campos médico y quirúrgico.

Certificados



Nuestra fábrica

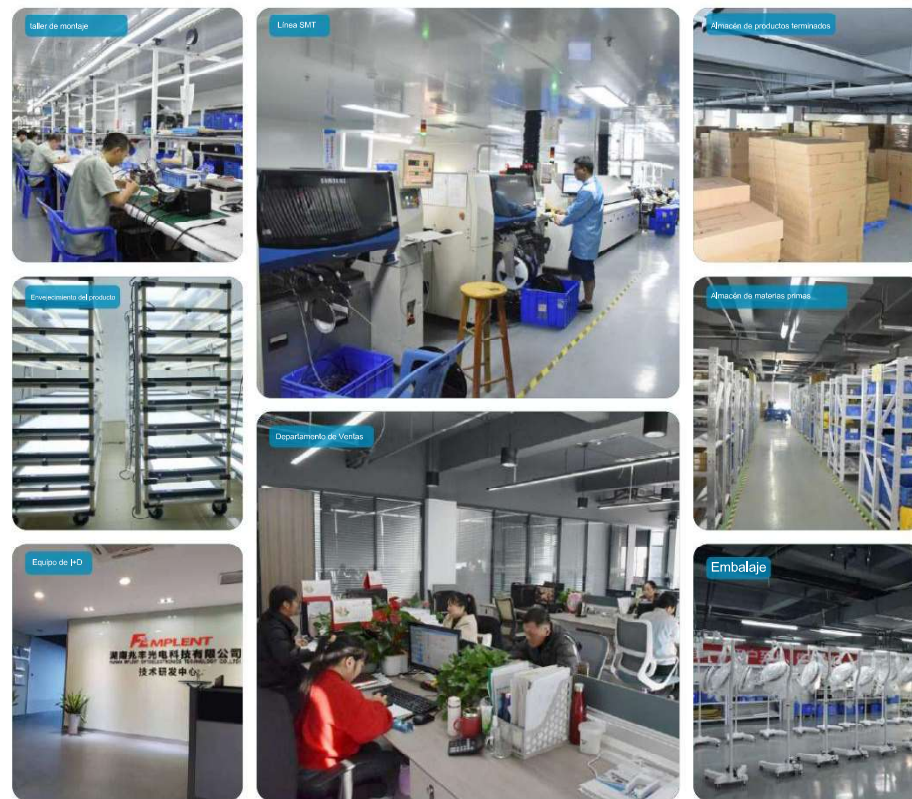




Lámpara quirúrgica serie K

Características del producto

- Lente óptica de PMMA, tecnología innovadora de captación de luz, excelente eficiencia lumínica.
- LED Osram alemán con una vida útil promedio superior a 50,000 horas.
- Sistema de atenuación PWM, temperatura de color ajustable de forma flexible.
- La cubierta exterior utiliza plásticos de ingeniería y una exclusiva cubierta superior incrustada de aluminio de grado aeroespacial.
- Mango esterilizado desmontable con cierre de hebilla, fácil de limpiar y esterilizar.
- Accionamiento de corriente constante para un funcionamiento estable y una mayor vida útil.
- Diseño aerodinámico ultradelgado con un grosor de cúpula de tan solo 95 mm (modelo 700).
- Sistema operativo sencillo e intuitivo: toque y haga clic en iconos específicos para realizar cada función.
- Diámetro de campo ajustable y dirección de cámara integrada opcional.
- Menú fácil de usar con controlador táctil de 4,3 pulgadas.
- Funciones opcionales: Compensación de sombras; ajuste de enfoque eléctrico, control mutuo para doble cúpula, función de detección de gestos, control remoto inalámbrico.
- Opcional: Sistema de cámara HD integrado/externo.



01 Color temperatura ajustable

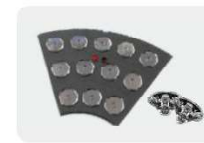

02 Nuevo diseño de lente de ladrillo



03 Compensación de sombra



04 Punto de luz eléctrica regulable



05 Control mutuo de lámparas duales (Opcional)



06 Función de detección de gestos (Opcional)



07 Sistema de cámara integrado opcional (opcional)



08 Control inalámbrico (Opcional)

Lámpara quirúrgica serie K



Selección de configuración

Modelo No. (H significa estándar alto)	Configuración de rendimiento	Instalación	Rojo y verde Modo claro	Compensación en la sombra	Digital Enfoque	Control mutuo de lámparas duales	control remoto inalámbrico	Función de detección de gestos	Cámara central HD integrada
ZW-K700/500H (faro 700+500)		Techo montado	●	●	●	●	Función opcional	Función opcional	Función opcional
ZW-K700/500 (Faro delantero 700+500)		Techo montado	●	○	○	○			
ZW-K700/700H (Faro delantero 700+700)		Techo montado	●	●	●	●			
ZW-K700/700 (Faro delantero 700+700)		Techo montado	●	○	○	○			
ZW-K500/500H (500+500 faro)		Techo montado	●	○	●	●			
ZW-K500/500 (Faro delantero 500+500)		Techo montado	●	○	○	○			
ZW-K700H (Faro delantero 700)		Techo montado	●	●	●	○			
ZW-K700 (Faro delantero 700)		Techo montado	●	○	○	○			
ZW-K500H (Faro delantero de 500)		Techo montado	●	○	●	○			
ZW-K500 (Faro delantero de 500)		Techo montado	●	○	○	○			
ZW-K700H(L) (Faro delantero 700)		Portátil	●	●	●	○			
ZW-K700(L) (Faro delantero 700)		Portátil	●	○	○	○			
ZW-K500H(L) (Faro delantero de 500)		Portátil	●	○	●	○			
ZW-K500(L) (Faro delantero de 500)		Portátil	●	○	○	○			

